

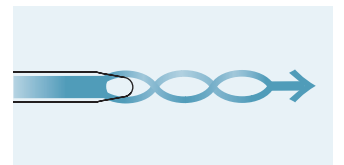


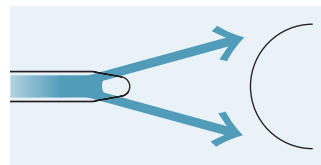

SINGLE USE IRRIGATION SYSTEM

Pseudoexfoliation (PEX) syndrome in the eyes is characterized by the accumulation of PEX material in the irido-corneal angle and on the trabecular meshwork. These deposits slowly impede the physiological outflow of the aqueous humor and lead to intraocular pressure (IOP) elevation. Goniowash is a new surgical technique using Tran Goniowash® for clearing PEX material to lower IOP postoperatively.

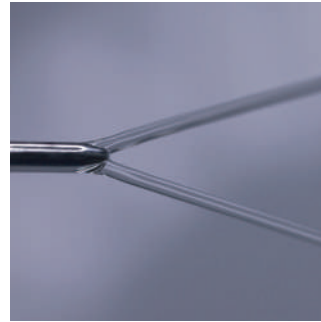

The Tran Goniowash® is a sterile and single use irrigation device used by physician in controlled environment to clear pseudo-exfoliative particles in the anterior chamber of the eye.

This new instrument is characterized by two distinct water jets separated from each other by a 30° angle. Thanks to the unique design of this device the fluid streams allow a very directional and targeted access to the trabecular meshwork.

TRAN GONIOWASH, TG-01, SPECIFICATIONS

Reference :	TG- 01
Cannula length :	19 mm
Radius of curvature :	25 mm
Outside diameter :	0.8 mm (20G)
Design :	Dr. V.T. Tran

TRAN GONIOWASH, PACKAGING

In a double sterile blister pack ; single use only.	
Packaging :	5 units
Size :	205 x 57 x 45 mm




BENEFITS

- Quick and easy to use according to Goniowash technique (<3min).
- Recovered and creation of the normal physiology flow of aqueous humor.
- Reduces the IOP and hypotensive drug postoperatively.
- No complication according to the study of 190 eyes (Dr. Tran, Dr. Mansouri, Dr. Mermoud).



Tek Kullanımlık Irrigasyon Sistemi

Gözlerde psödoeksfolyasyon (PEX) sendromu, irido-korneal açıda ve trabeküler ağda PEX materyalinin birikmesiyle karakterizedir. Bu birikintiler, aköz hümörün fizyolojik akışını yavaşça engelleyerek intraoküler basınç (IOP) yükselmesine yol açar. Goniowash, postoperatif IOP'yi düşürmek amacıyla PEX materyalini temizlemek için Tran Goniowash® kullanılarak uygulanan yeni bir cerrahi tekniktir.

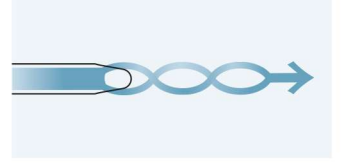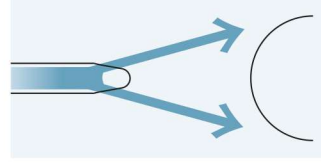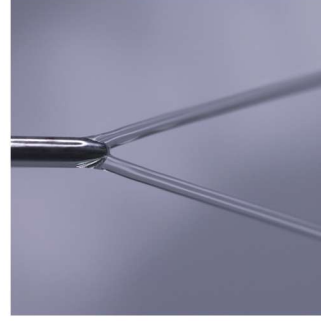

Tran Goniowash®, gözün ön kamarasındaki psödoeksfolyatif partikülleri temizlemek amacıyla kontrollü bir ortamda hekim tarafından kullanılan steril ve tek kullanımlık bir irrigasyon cihazıdır.

Bu yeni alet, birbirinden 30° açıyla ayrılmış iki ayrı su jeti ile karakterizedir. Cihazın benzersiz tasarımı sayesinde sıvı akımları, trabeküler ağa çok yönlü ve hedefe yönelik erişim sağlar.

TRAN GONIOWASH, TG-01, Özellikler

Referans :	TG- 01
Kanül uzunluğu	19 mm
Eğim yarıçapı :	25 mm
Dış Çap :	0.8 mm (20G)
Dizayn :	Dr. V.T. Tran

TRAN GONIOWASH, Paketleme

Çift steril blister ambalajda; tek kullanımlık.

Paketleme: 5 Adet

Boyut : 205 x 57 x 45 mm

Avantajlar

- Goniowash tekniğine göre hızlı ve kolay kullanım (<3 dakika).
- Aköz hümörün normal fizyolojik akışının geri kazandırılması ve oluşturulması.
- Postoperatif IOP azalması ve hipotansif ilaç ihtiyacının azalması.
- 190 göz üzerinde yapılan çalışmaya göre komplikasyon yok (Dr. Tran, Dr. Mansouri, Dr. Mermoud).

